

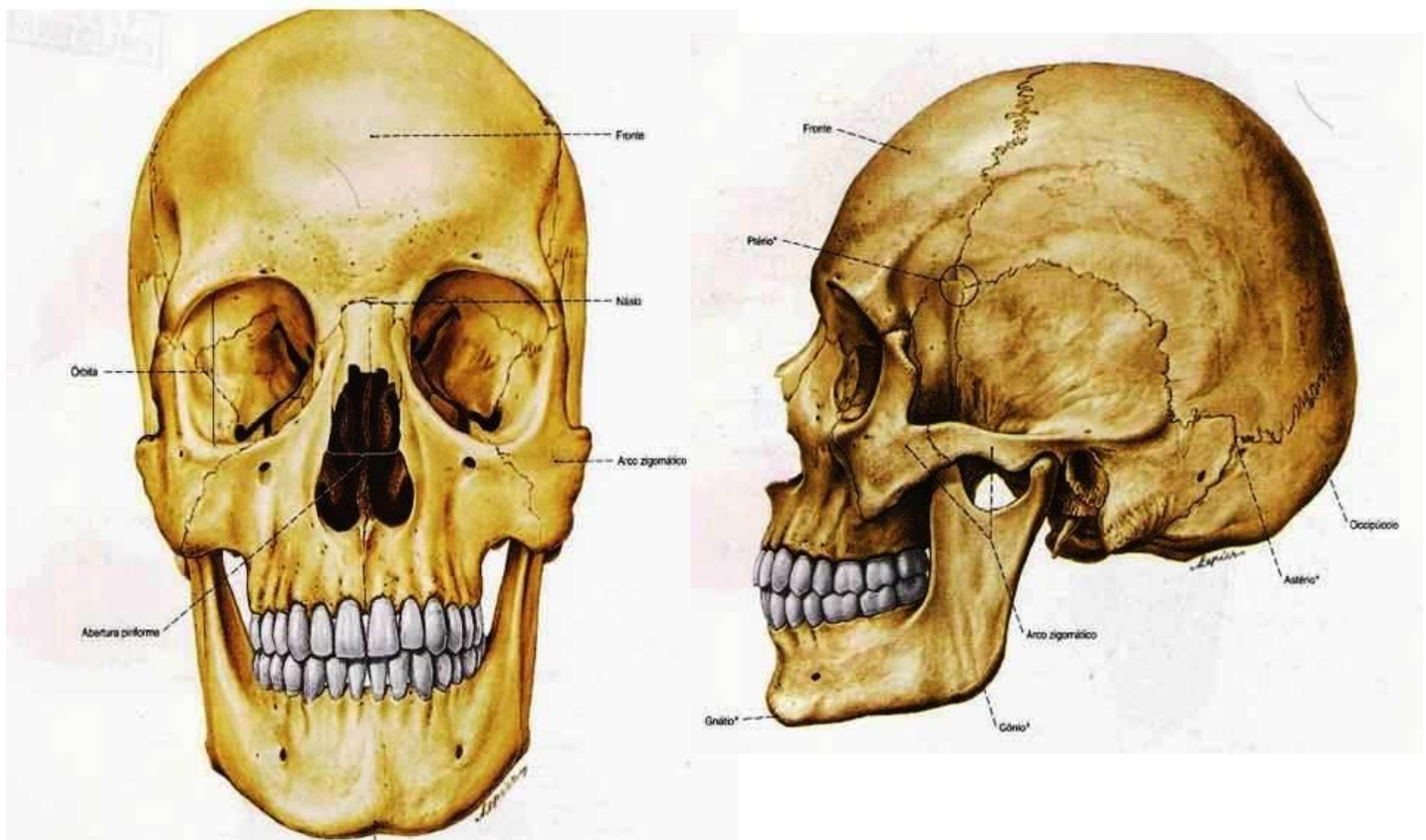


# POSICIONAMENTO RADIOLOGICO

## CRÂNIO E OSSOS DA FACE

### VISTA ANATÔMICA

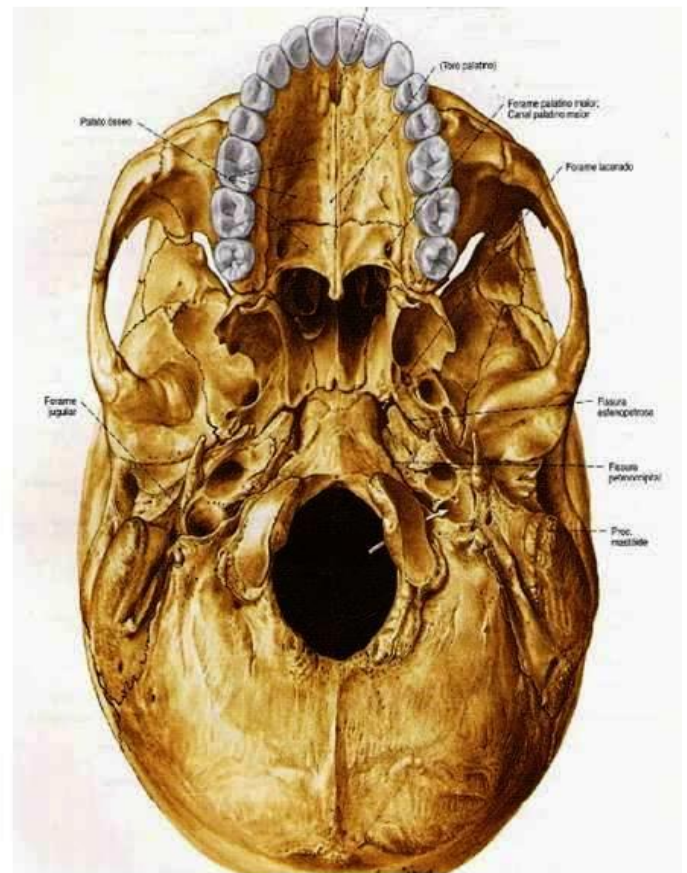

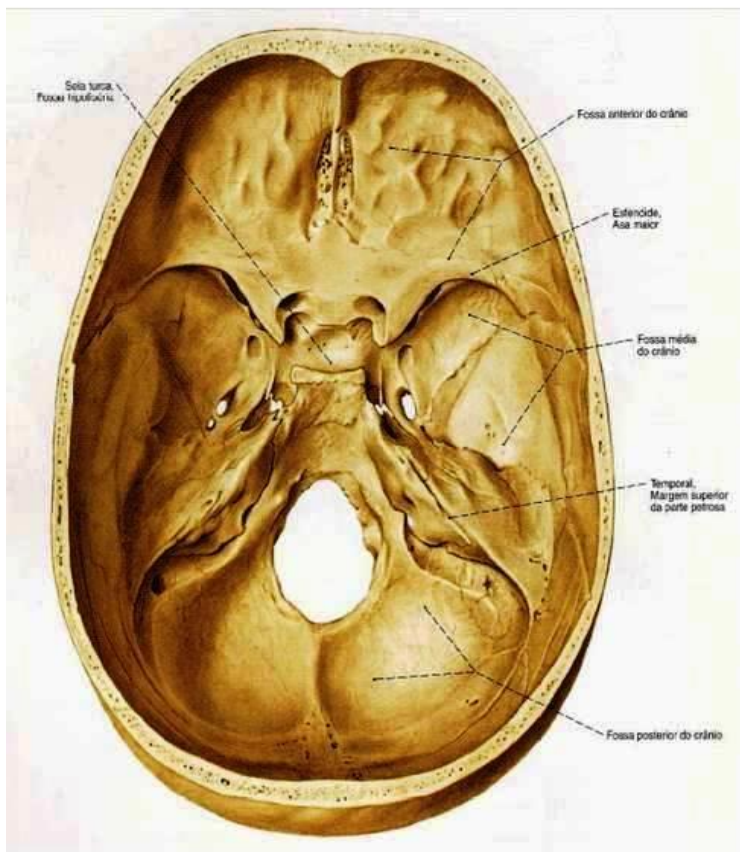

## CILINDRO DE EXTENSÃO



- **INSTRUMENTO QUE TEM, POR FINALIDADE AUMENTAR A QUALIDADE DO EXAME FAZENDO QUE TODA A RADIAÇÃO PRODUZIDA SEJA DIRECIONADA PARA UM ÁREA ESPECÍFICA PRE ESTABELECIDO PELO TR.**

## Crânio – Frente AP

Decúbito dorsal. LOM perpendicular ao filme.  
RC na glabella. Filme 24x30 L.

### Fatores de exposição

DFFi: 1 m

kV: 66

mAs: 30



## Crânio – Perfil

Posição de nadador. PSM paralelo ao filme. RC  
na altura do esfenóide. Filme 24x30 T.



### Fatores de exposição

DFFi: 1.0m

kV: 62

mAs: 24

## Crânio – Semiaxial (incidência de Towne)


Decúbito dorsal. LOM perpendicular ao filme.  
RC no frontal com 25° a 30° de inclinação caudal.  
Filme 24x30 L.

### Fatores de exposição

DFFi: 1m

kV: 70

mAs: 35

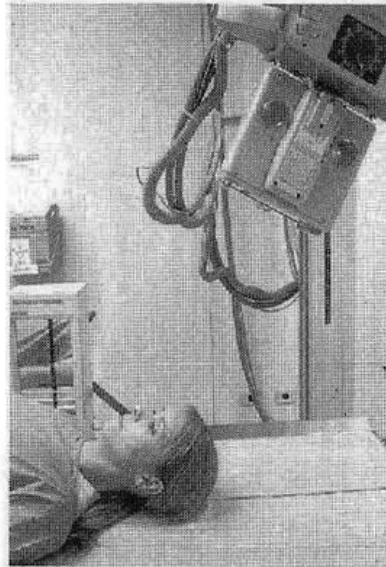

## Crânio – Axial (incidência de Hirtz)

!!!

Paciente sentado. Cabeça em extensão com o  
vértice apoiado no bucky vertical. Plano antropoló-  
gico basal paralelo ao filme. RC no centro da LOM.  
Filme 24x30 L.



### Fatores de exposição

DFFi: 1.0m

kV: 75

mAs: 40

## Seios da face – Frontonaso (incidência de Caldwell)

Decúbito ventral. Frontal apoiado na mesa, RC no nasion com inclinação de 12° caudal. Filme 18x24 L (ou 24x30 dividido em 2).

### Fatores de exposição

DFFi: 1.0m

kV: 70


mAs: 32

Usar cilindro de  
extensão



## Seios da Face – Mento-naso (incidência de Watters)

Decúbito ventral. Mento apoiado na mesa, RC passa pelo centro da LOM e emerge na espinha nasal anterior (a ponta do nariz fica levemente afastada do plano da mesa).

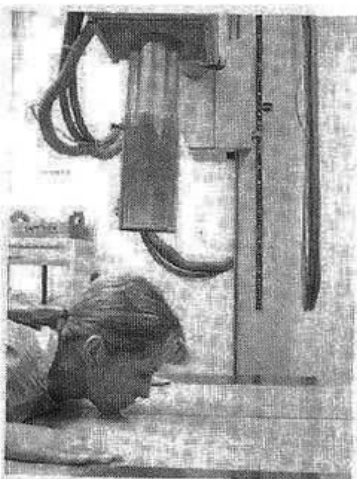

### Fatores de exposição

DFFi: 1m

kV: 75

mAs: 40

Usar cilindro de  
extensão

## Cavum (Perfil)

Perfil da face. RC incidindo 4 cm acima do gônio da mandíbula. Boca fechada.

### Fatores de exposição

DFFi: 1.0m

kV: 60

mAs: 14

Usar cilindro de  
extensão



## ATM (Perfil)

Posição de nadador. RC com inclinação caudal de 25°, objetivando a ATM, que está em contato com a mesa. Filme 18x24 L (24x30 T dividido em 2)





### Fatores de exposição

DFFi: 1.0m

kV: 66

mAs: 33

Usar cilindro de  
extensão

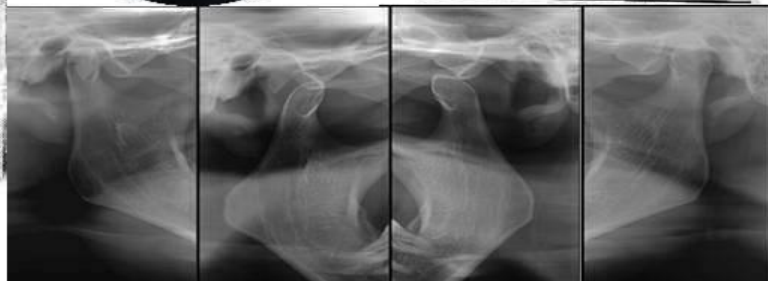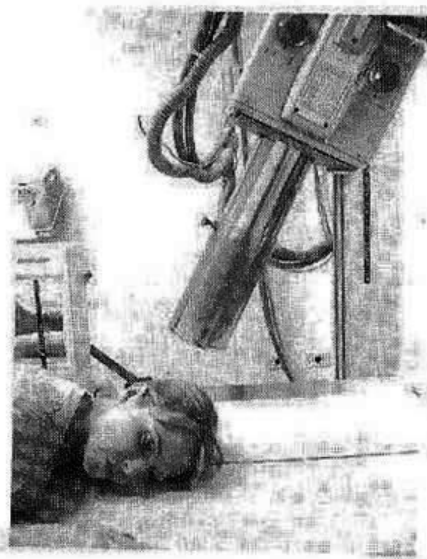

## Mastoide – Perfil (incidência de Schüller)

Posição de nadador. RC com inclinação caudal de 25°, objetivando a mastoide, que está em contato com a mesa. Filme 18x24 L (24x30 T dividido em 2)

### Fatores de exposição

DFFi: 1.0m

kV: 66

mAs: 30

Usar cilindro de extensão e dobrar o pavilhão auditivo para frente



**FRATURAS NO  
CRÂNIO COM  
PRESENÇA DE  
MÚLTIPLOS  
FRAGMENTOS  
METÁLICOS**



# SINUSOPATIAS

**VELAMENTO TOTAL  
DO SEIO MAXILAR  
DIREITO**



## FRATURAS DOS OSSOS DA FACE

